


Sof-Lex 3M

Nuovo sistema di lucidatura
diamantata




Dereferenziamiento e sostituzione delle spirali Sof-Lex

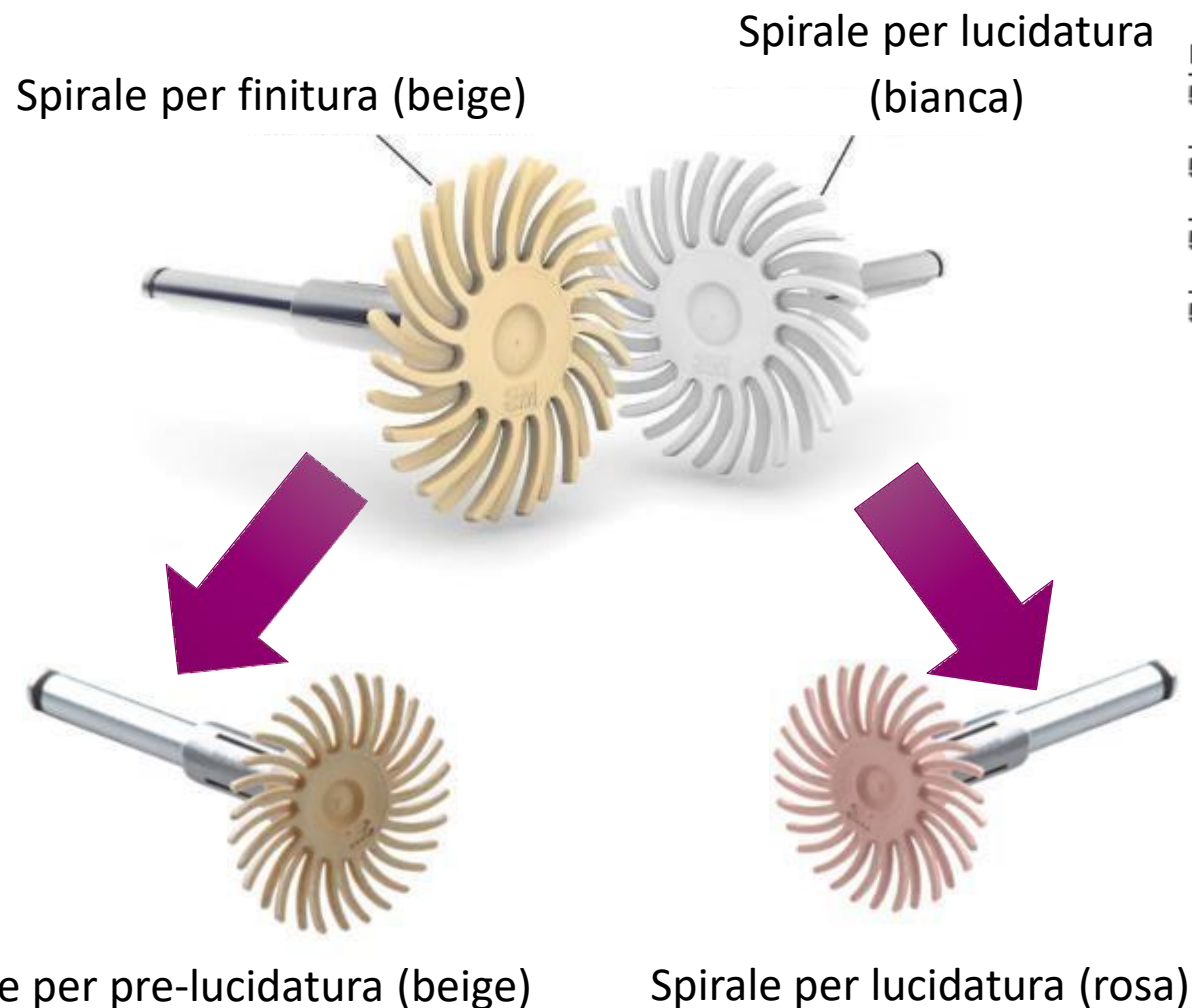


Réf.	Description
5082I	Roues spirales Sof-Lex™ – kit d'introduction 10 roues spirales Sof-Lex de finition (beige); 10 roues spirales Sof-Lex de polissage (blanc);
5080	Roues spirales de finition Sof-Lex™ – réassort 30 Sof-Lex roues spirales de finition (beige)
5081	Roues spirales de polissage Sof-Lex™ – réassort 30 Sof-Lex™ roues spirales de polissage (blanc)
5082SK	Roues spirales, disques et bandes Sof-Lex™ – coffret complet système 10 Sof-Lex roues spirales de finition (beige) 10 Sof-Lex roues spirales de polissage (blanc) Sof-Lex disques de polissage extra-fin 12,5 mm : 30 de chaque (orange) : 2382C (gros); 2382M (moyen); 2382F (fin); 2382SF (superfin) Sof-Lex disques de polissage extra-fin 9,5 mm : 30 de chaque (orange) : 2381C (gros); 2381M (moyen); 2381F (fin); 2381SF (superfin) Sof-Lex Bandes abrasives de finition : 15 de 1954C/M (gros/moyen), 1 mandrin RA

**Nuova generazione di spirali
riutilizzabili**

Nuova generazione di spirali

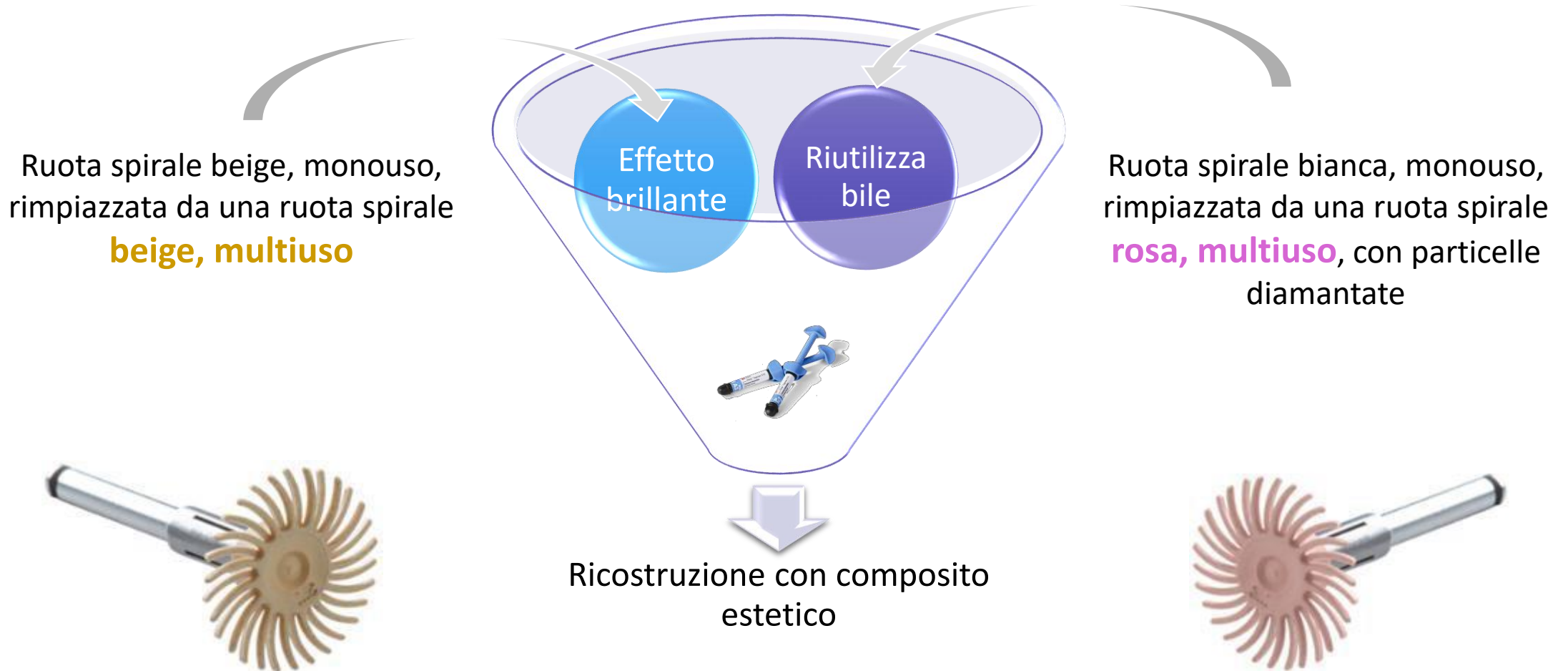

Sempre 4 tappe

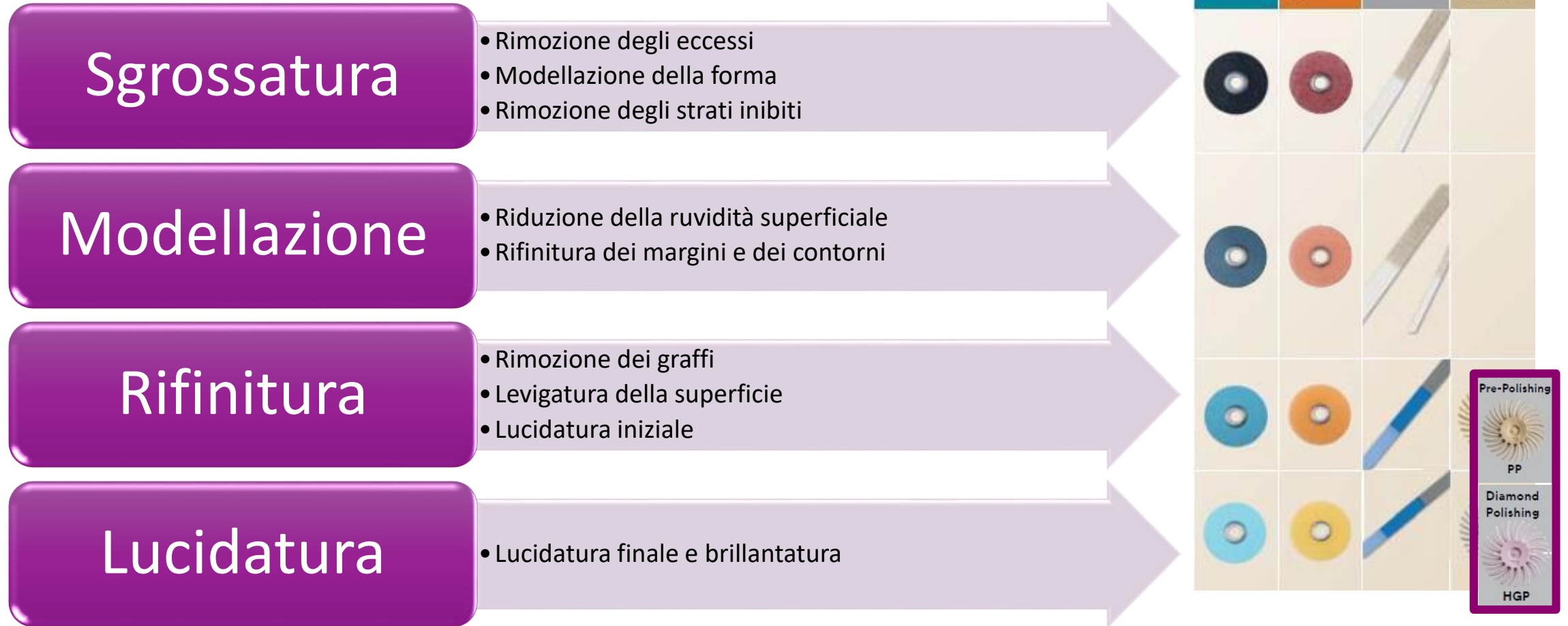


Indicazioni:

Restauri diretti in:

- Composito.
- Vetroionomeri modificati con resina.
- Materiali provvisori bis acrilici.

Restauri indiretti in:

- Composito.
- Lava Ultimate 3M.
- Metalli preziosi e semi-preziosi.

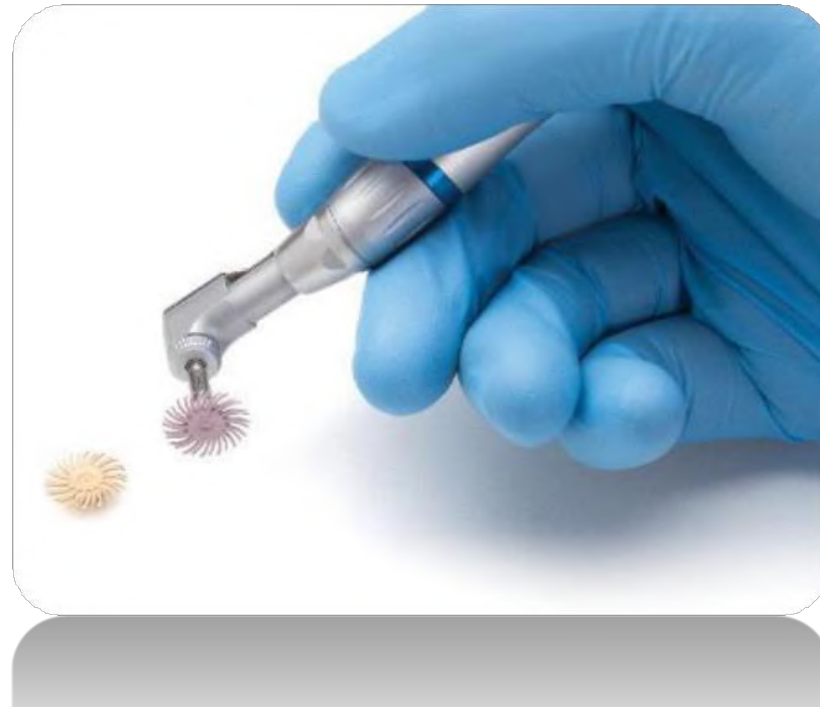

La brillantezza di un diamante senza utilizzare la pasta per lucidatura!



Brillantezza naturale incomparabile

- Particelle diamantate di una pasta per lucidatura ma direttamente integrate nella ruota spirale.
- Elevata brillantezza con il composito
- Filtek Supreme XTE 3M ESPE



Conservazione dell'anatomia

- Superficie liscia
- Pochi detriti



Accesso a tutte le superfici


- Ruote spirali flessibili con tutte le facce lavoranti
- Non danneggia i tessuti molli



Vantaggi

- Rapidità dei risultati e facilità di utilizzo


Vantaggi della geometria della spirale

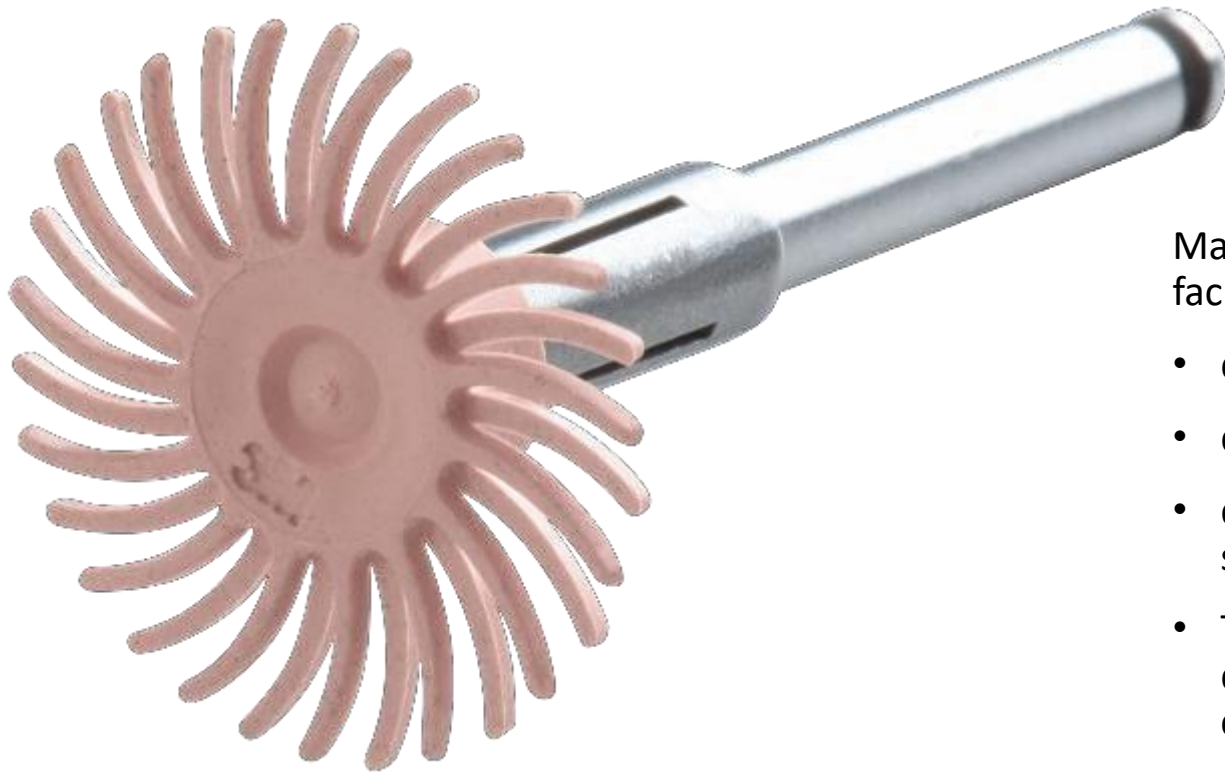

Mantiene la micro-geografia della superficie adattandosi facilmente ed in modo preciso all'anatomia:

- dei restauri anteriori e posteriori;
- delle superfici convesse e concave;
- di tutte le superfici dentali: vestibolari, occlusali e linguali, nei solchi e nelle fessure.
- Tutte le facce della ruota sono lavoranti poiché le particelle diamantate sono integrate direttamente nell'elastomero che costituisce la ruota.
- Forma flessibile e morbida per non lesionare i tessuti molli.

Accesso facilitato a tutte le superfici del dente

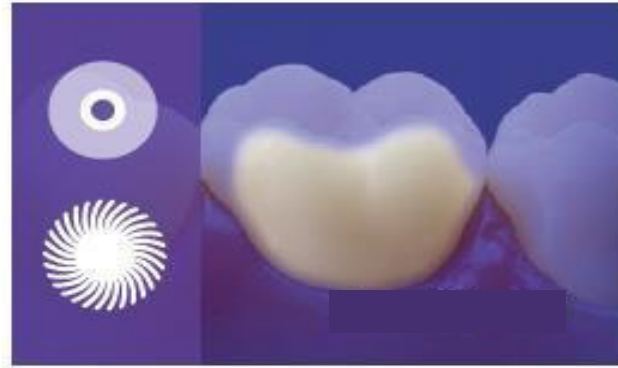

Sof-Lex™ Discs



Sof-Lex™ Diamond
Polishing System

Modalità di utilizzo e pulizia

Viene raggiunto un risultato ottimale quando le spirali vengono utilizzate:

- Su superfici umide;
- Con una pressione ed una velocità del contrangolo moderata compresa tra 15.000 e 20.000 giri/min.

Dispositivo medico consegnato non sterile. Deve essere pulito, sterilizzato, e controllato prima di ogni utilizzo:

1. Pulizia automatizzata (autoclave o autoclave ad ultrasuoni) o manuale.
2. Disinfezione termica.
3. Sterilizzazione a vapore.

