


LANG

Dental Chemistry Specialist
for over 70 years

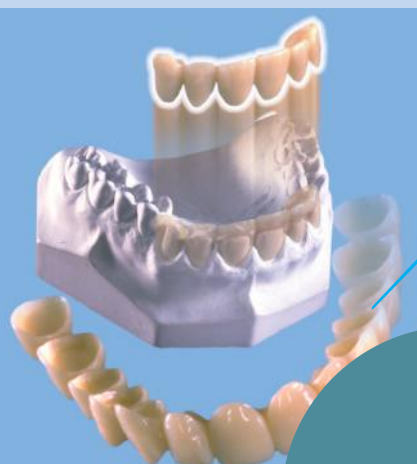

Jet Kit Splintline

Una linea completa
di resine per ponti
e corone provvisori
per lo studio
e il laboratorio



Indicazioni

- Ponti e corone provvisori indiretti di lunga durata
- Transfers per impronte di posizione
- Riparazione di ponti e corone provvisori
- Caratterizzazione di denti artificiali per protesi mobile

Jet Kit

Per la realizzazione di ponti e corone provvisori indiretti in laboratorio

Jet Kit è una resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.

Da una ricerca indipendente (Clinical Research Associates) sulle resine per provvisori, **Jet Kit** è risultata essere una delle più affidabili per la resistenza all'abrasione ed ai carichi funzionali.

Minori rischi di rotture

Gli speciali agenti reticolanti ed il sistema di catalizzatori di **Jet Kit** garantiscono una polimerizzazione completa e conferiscono alla struttura del provvisorio una resistenza eccezionale alle fratture. **Jet Kit** sopporta più a lungo i carichi masticatori e le frequenti rimozioni e riadattamenti a cui sono normalmente sottoposti i provvisori terapeutici di lunga durata.

Lunga funzionalità nel tempo

Per la produzione di **Jet Kit** sono impiegati copolimeri acrilici d'elevata qualità in modo da ottenere provvisori dalle caratteristiche eccezionali:

- struttura compatta: **minor assorbimento di fluidi orali**
- resistenti all'abrasione: **costanza della dimensione verticale**
- superfici omogenee: **facilmente lucidabili per un minor accumulo di placca**

Estetica personalizzabile

I presupposti estetici di un ponte provvisorio destinato ad una lunga permanenza nel cavo orale sono fondamentali per l'accettazione psicologica del paziente e per un uniforme passaggio dal provvisorio al definitivo. **Jet Kit**, oltre allo smalto Incisal, è disponibile in 8 colori miscelabili tra loro corrispondenti alle più utilizzate scale per la presa del colore.



Provvisorio estetico di lunga durata

Universale

Jet Kit è chimicamente compatibile con le più comuni resine acriliche utilizzate per ri-basare o riparare ponti e corone provvisori in studio o in laboratorio.

Biocompatibile

Dopo la polimerizzazione, **Jet Kit** presenta dei bassissimi valori di monomero residuo non combinato tali da garantire un'ottima tollerabilità con le mucose orali.

I bordi marginali, perfettamente lucidabili anche in spessori sottili, contrastano l'accumulo di placca batterica e non interferiscono con il parodonto marginale.

Versatile

Jet Kit può essere colata direttamente in una matrice o essere stratificata con la tecnica a pennello. Ciò la rende perfettamente compatibile con tutte le tecniche utilizzate per la realizzazione di provvisori.



Colata in mascherine siliconiche



Colata in matrici termostampate



Completamento di faccette ottenute da denti artificiali

Colori e confezioni

Confezioni	Contenuto	Colori
Kit 6/1	6 x 30 gr. Polvere (col. 35/45/62/65/67/81) + 10 gr. Incisal + 120 ml. Liquido + 7 ml. Glaze	35 (A1) - 45 (A2) - 62 (A3)
Ricambi polvere	120 - 200 - 400 - 800 gr.	65 (D3) - 67 (B3) - 69 (C2)
Ricambi liquido	120 - 250 - 500 - 1000 ml.	77 (B4) - 81 (A3.5) - Incisal

Indicazioni

- Ponti e corone provvisori diretti
- Ribasatura di provvisori indiretti
- Ribasatura e completamento di coroncine preformate in policarbonato
- Riparazione diretta di provvisori

Splintline

Per la realizzazione di ponti e corone provvisori diretti in studio

Le particolari condizioni operative - tessuti vivi, campo operatorio e tempi ridotti - in presenza delle quali si realizzano i ponti e corone provvisori alla poltrona, richiedono una resina appositamente formulata affinché l'odontoiatra possa:

- SEMPLIFICARE i passaggi e ridurre i tempi di realizzazione
- RIMUOVERE FACILMENTE il manufatto dal cavo orale anche in presenza di sottosquadri
- RISPETTARE i tessuti vivi con una resina tollerabile dal paziente.

Impiego universale

Splintline è disponibile in ben 7 tonalità di polveri, tutte corrispondenti alle scale colori più utilizzate ed ai colori delle resine **Jet Kit** per provvisori diretti da ribasare poi in studio. Splintline può essere utilizzata per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attraverso le più svariate tecniche dirette:

Velocità e semplicità d'uso


I preparativi e le procedure operative sono state ridotte e semplificate: l'intera realizzazione sino all'inizio della polimerizzazione non richiede più di 5-6 min. Grazie alla memoria elastica del prodotto che ne evita la deformazione, la rimozione del provvisorio non è più un problema anche in presenza di sottosquadri e asimmetria delle preparazioni.

Elevazione termica controllata

L'esatto dosaggio del sistema catalizzante fa sì che il picco esotermico da polimerizzazione venga ritardato rispetto alla fase elastica quando il provvisorio è già stato rimosso dal cavo orale.

Splintline, quando si trova in bocca, non supera la temperatura corporea; una volta rimossa, la resina completa il suo indurimento dando luogo ad una reazione esotermica che, agendo da catalizzatore della reazione, favorisce la completa polimerizzazione del manufatto.

I vantaggi sono evidenti: superfici più compatte e minor percentuale di monomero residuo non combinato possibile causa di irritazioni e reazioni flogistiche.

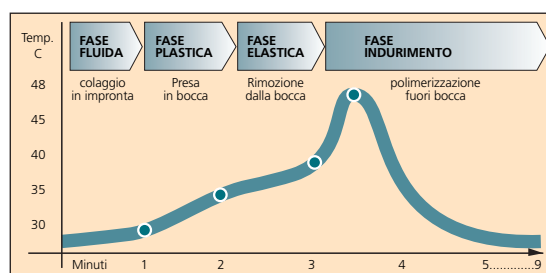

Tempi di lavorazione e comportamento termico della resina Splintline



Colata in impronta



Colata in matrici termostampate



Ribasatura di coroncine preformate

Colori e confezioni

Confezioni	Contenuto	Colori
Kit 6/1	6 x 30 gr. Polvere (col. 35/45/62/65/67/81) + 120 ml. Liquido + 7 ml. Glaze	35 (A1) - 45 (A2)
Ricambi polvere	60 - 120 - 200 gr.	62 (A3) - 65 (D3)
Ricambi liquido	120 - 250 ml.	67 (B3) - 69 (C2)
		77 (B4) - 81 (A3.5)